

## Orthèse stabilisatrice de cheville dans le plan frontal


**DESCRIPTION :**

Orthèse stabilisatrice de la cheville dans le plan frontal constituée de deux coques malléolaires amovibles latérales rigides, protégées intérieurement par deux garnitures de forme et de taille adaptée à la morphologie du patient. Elle se règle par sangles auto-adhésives. Les coques sont reliées entre elles par une talonnette ajustable en hauteur.

### CARACTERISTIQUES:

Stabilisation de la cheville,  
Facile à appliquer,  
Système d'attache Velcro,  
Modèle droit ou gauche,  
Taille universelle adulte et junior

- Ne contient pas de latex naturel
- Ne contient pas de phthalate

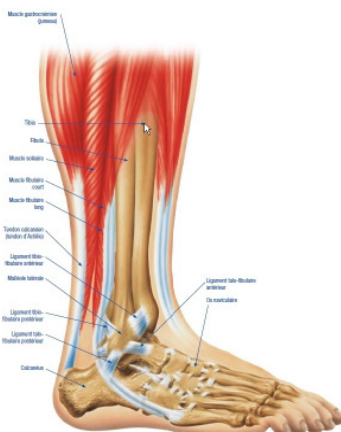

**INDICATIONS:**

Traumatologie de la cheville, entorses latérales bénignes à moyennes.

### MODE D'EMPLOI:

1. Choisir votre attelle, droite ou gauche selon le côté atteint,
2. Ajuster la talonnette sur les deux montants des coques en fonction de la largeur du talon et fixer les deux languettes Velcro,
3. Installer les deux coques malléolaires de part et d'autre de la cheville, les malléoles interne et externe du patient devant être positionnées dans les évidements. Positionner la coque marquée IN du côté interne, et la coque marquée OUT du côté externe de la jambe,
4. Mettre en place les sangles dans les boucles puis régler la sangle inférieure,
5. Enfiler la chaussure,
6. Régler la sangle supérieure pour finaliser le serrage complet des deux coques de l'orthèse,
7. Pour ajuster le maintien, répéter les opérations 3 et 5.

### PARTICULARITES D'UTILISATION:

L'attelle peut être retirée pour permettre la toilette. Ne la remettre qu'après avoir correctement séché le pied et la cheville.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré le produit. En cas d'inconfort, le consulter.

### ENTRETIEN :

Retirer la garniture et les sangles auto-agrippantes. Laver les sangles de l'attelle à la main, dans de l'eau tiède (35°C maxi) au savon naturel. Rincer à l'eau claire, laisser sécher à l'ombre, loin de toute source de chaleur. Ne pas repasser. Nettoyer, également les coques avec une éponge propre et du savon naturel.

### CONTRE-INDICATIONS:

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou des zones infectées

### CONDITIONNEMENT:

Boîte carton individuelle

Existe en deux modèles : Droit - Gauche. Taille adulte universelle et version Junior.

### Présentation hôpital

#### 1. Adulte

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809191189	7874989	72819-00083-00	Gauche			
4042809117684	7874972	72819-00084-00	Droite			

### Présentation hôpital et pharmacie avec vignette LPPR

#### 1. Adulte

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809117684	7874972	72819-09084-00	Droite	1	24	2107972
4042809117653	7874989	72819-09083-00	Gauche	1	24	2107972

#### 2. Junior

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809221107	4479821	73088-09000-00	Droite	1	24	2107972
4042809221121	4479838	73088-09001-00	Gauche	1	24	2107972

(\*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

### STERILISATION:

Livré non stérile

BSN medical SAS  
57, boulevard Demorieux  
F - 72058 LE MANS Cedex 2  
Tél.: 02 43 83 40 40  
Fax: 02 43 83 40 41

#### CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485